


mediCAD MR-Réalité mixte

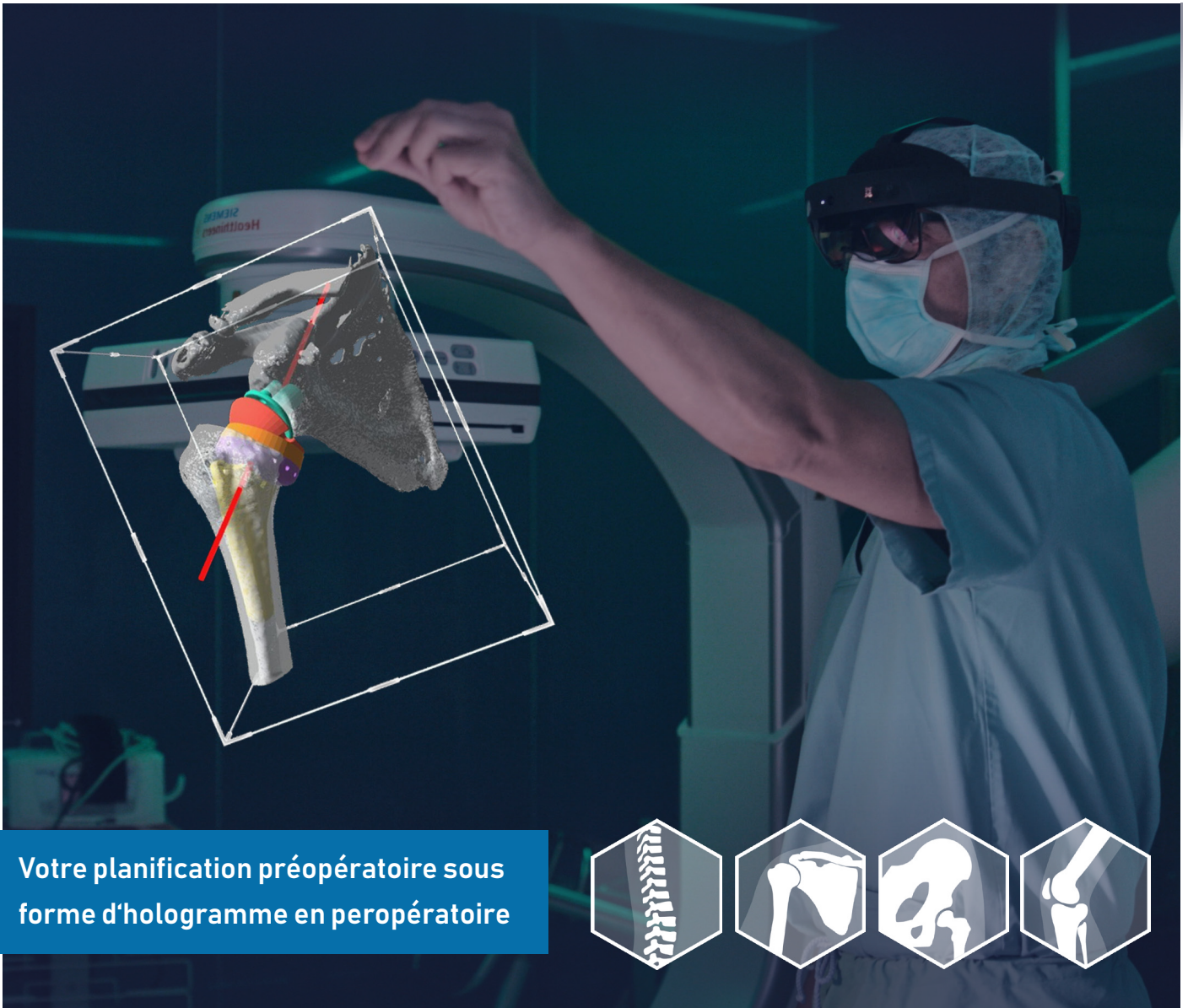


Votre planification préopératoire sous
forme d'hologramme en peropératoire

Un logiciel innovant pour la visualisation pré, per et
postopératoire de votre planification à partir de [mediCAD 3D](#) :

- Genou
- Hanche
- Epaule
- Rachis



mediCAD® MR est un logiciel pour la visualisation en peropératoire de votre planification préopératoire. Il fonctionne avec le casque de réalité mixte HoloLens 2 de chez Microsoft. Vous pouvez ainsi emporter votre planification numérique dans la salle d'opération et y accéder à tout moment. Contrairement à un simple écran, **mediCAD® MR** vous permet de visualiser votre planification en 3 dimensions, de la manipuler comme bon vous semble et de la travailler comme un objet présent dans la pièce.

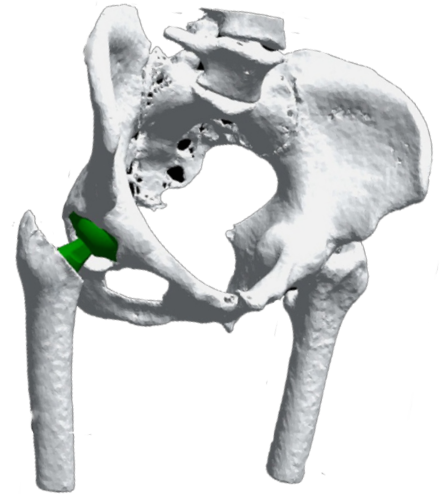

Qu'est-ce que la réalité mixte?

Les solutions de réalité mixte permettent à l'utilisateur d'enrichir son environnement réel d'un contenu virtuel. Contrairement à la réalité virtuelle (où l'utilisateur s'immerge complètement dans un monde virtuel et s'y déplace), l'environnement analogique réel de la réalité mixte reste entièrement visible. Cependant, il est complété par des éléments holographiques 2D et 3D qui peuvent être déplacés dans la pièce comme des objets réels, être figés ou interagir avec l'environnement analogique.

C'est ainsi que fonctionne **mediCAD® MR**. En tant que chirurgien, vous avez la possibilité de visualiser un hologramme 3D grandeur nature de la région anatomique considérée. Vous pouvez saisir, déplacer et mettre à l'échelle cet hologramme comme un objet réel. Cela vous permet d'avoir la planification sous les yeux avant et pendant l'opération et d'en saisir tous les détails.

- ✓ Intégration transparente dans le flux de travail de **mediCAD® 3D**
- ✓ Visualisation en peropératoire paramétrable et personnalisable
- ✓ Différentes possibilités d'adaptation de la visualisation de l'hologramme
- ✓ Opérabilité stérile et sans contact
- ✓ Possibilités de travail collaboratif





Fonctions

1. Intégration transparente dans le flux de travail de mediCAD 3D

mediCAD® MR peut être utilisé avec tous nos modules mediCAD® 3D. Vous pouvez transférer votre planification 3D et tous les contenus pertinents, directement dans la réalité mixte pour les visualiser en peropératoire.

Les implants planifiés sont transférés indépendamment du fabricant avec leur position anatomique. mediCAD® MR fournit un flux de travail intuitif pour un affichage rapide et facile de tout le contenu de la planification préopératoire.

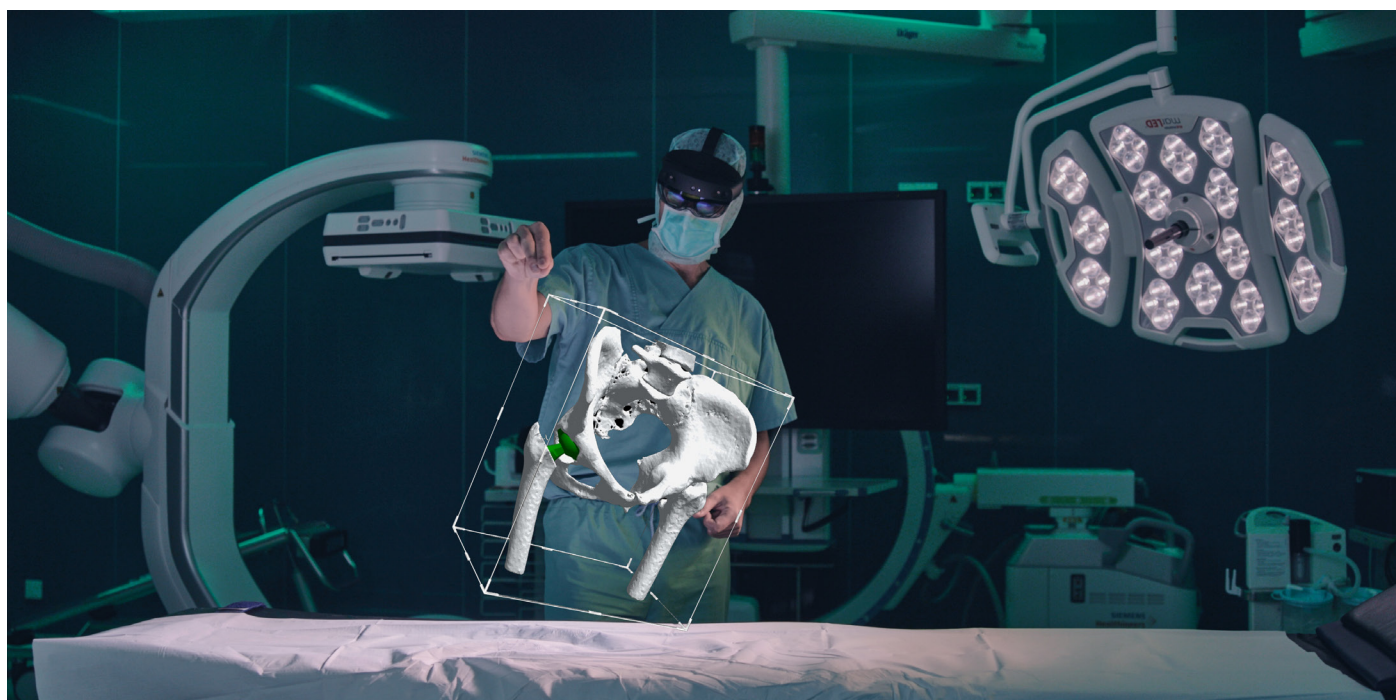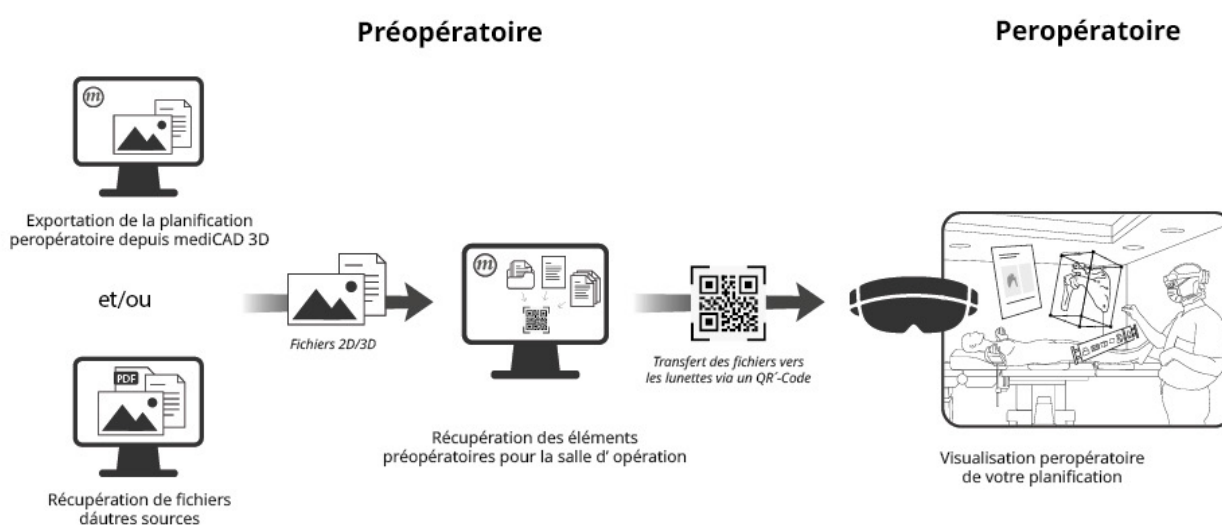




2. Affichage peropératoire personnalisable

Pour vous assister au mieux en peropératoire, vous avez la possibilité de personnaliser à votre guise les éléments que vous souhaitez afficher en peropératoire.

Vous pouvez les récupérer soit à partir d'un stockage local, soit directement à partir du PACS.

Exemples d'éléments pouvant être affichés :

- ✓ Modèle 3D de la partie du corps planifiée
- ✓ Modèle 3D de l'anatomie préopératoire
- ✓ Rapport de planification
- ✓ Mesures préopératoires
- ✓ Couches scanner à faire défiler
- ✓ Radiographies
- ✓ Autres images ou fichiers, tels que des instructions chirurgicales

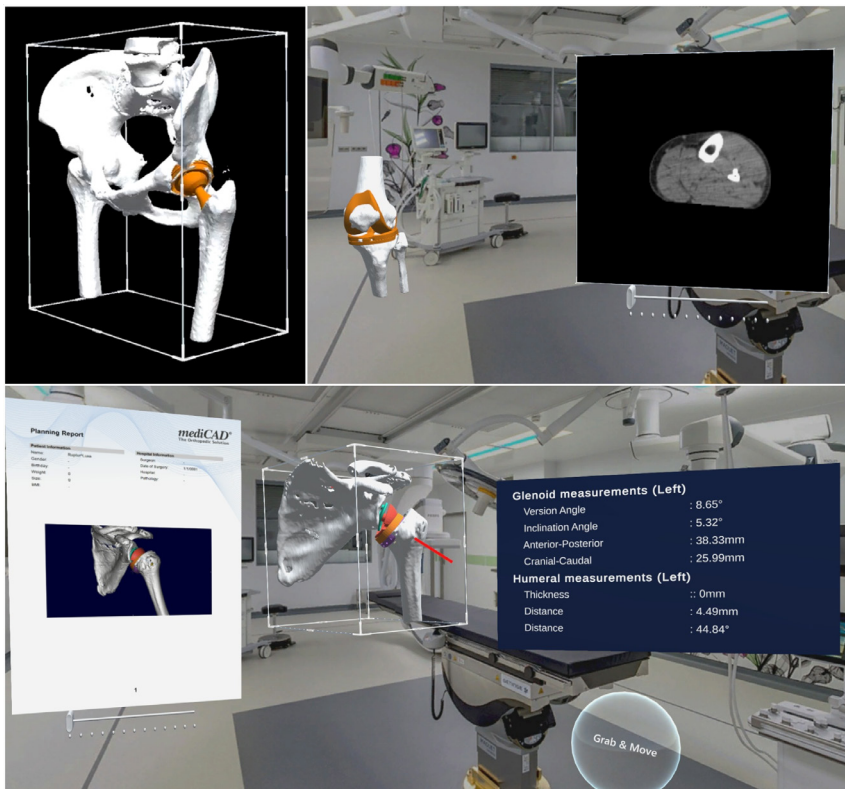




3. Personnalisation de l'affichage de l'hologramme

Pour tirer le meilleur parti de l'affichage tridimensionnel de votre planification, le logiciel offre diverses possibilités de configuration pour l'affichage de l'hologramme :

- ✓ Ajustement de la transparence de la structure osseuse
- ✓ Segmentation des implants et des os pour les visualiser séparément
- ✓ Masquage de zones via la sphère de visualisation
- ✓ Alignement automatique en fonction des plans anatomiques
- ✓ Déplacement, agrandissement et rotation de l'hologramme

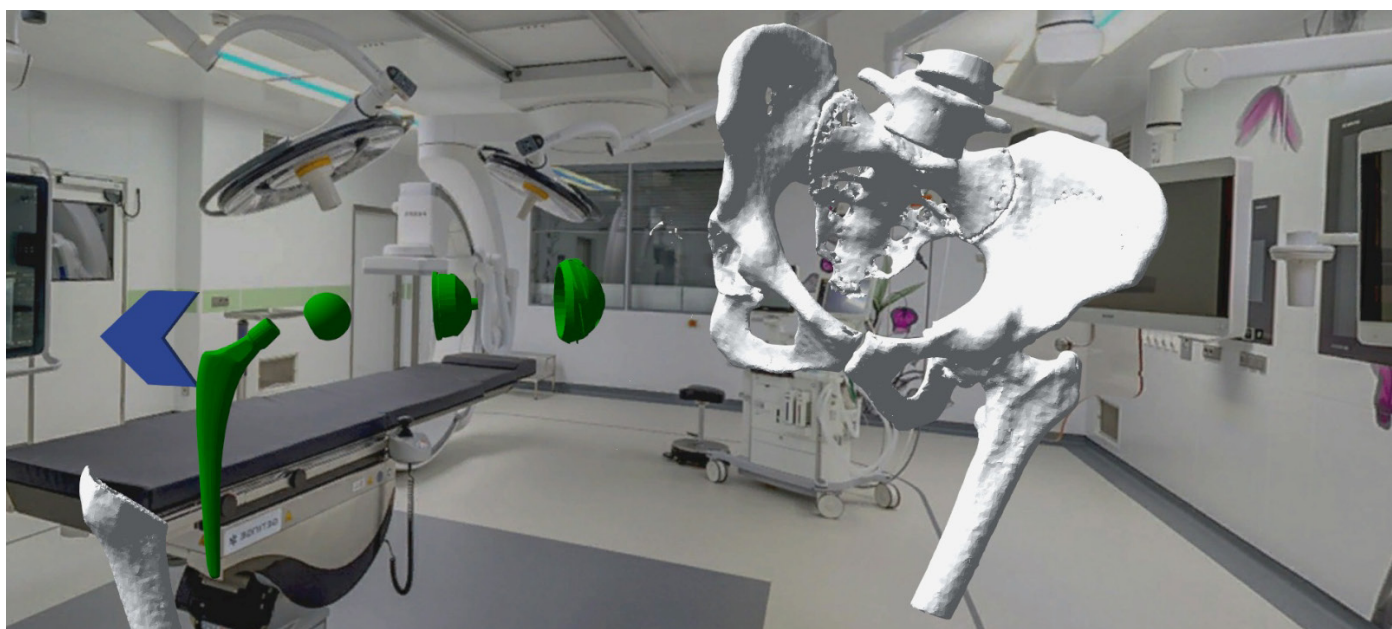

4. Utilisation stérile et sans contact

Le logiciel peut être utilisé sans aucun contact physique et est donc totalement stérile.

Les boutons et les hologrammes peuvent être saisis et déplacés grâce à une commande gestuelle intuitive, comme s'il s'agissait d'éléments physiques réels.

Pour garantir une utilisation même lorsque vos mains sont occupées, le logiciel peut également être utilisé par commande vocale.



5. Travail collaboratif

mediCAD® MR vous donne la possibilité de partager votre expérience de réalité mixte avec d'autres personnes!



Diffusion en direct

Le logiciel vous permet de transmettre votre champ de vision, y compris tous les hologrammes, en temps réel depuis les lunettes HoloLens vers un PC.

Cela vous donne la possibilité de laisser d'autres personnes participer à votre opération sans qu'elles soient physiquement présentes dans la salle d'opération.

Enregistrement vidéo

Vous avez également la possibilité d'enregistrer et de sauvegarder une capture vidéo à des fins éducatives ou de documentation.

Rencontre virtuelle

La diffusion en direct de la vidéo est possible dans les deux sens, ce qui vous permet de connecter d'autres personnes via un PC pour participer à l'opération. De cette manière, vous pouvez également aider vos collègues à distance lors de leurs interventions ou leur demander conseil.

Hologrammes partagés

Vous souhaitez analyser l'intervention prévue avec votre médecin assistant ou montrer en détail à votre patient comment va se dérouler l'intervention ? Le logiciel vous permet de coupler plusieurs lunettes HoloLens et d'accéder simultanément aux mêmes hologrammes pour les visualiser ensemble.





Domaines d'application :

Préopératoire

- **Analyse approfondie de la pathologie**

Même les plus petits détails qui sont normalement cachés, peuvent être visualisés en préopératoire

Peropératoire


- **Visualisation du contenu de la planification**

Réduisez le nombre d'écrans chirurgicaux nécessaires et gagnez du temps en affichant toutes les informations importantes directement dans votre champ de vision et sans avoir à vous éloigner du patient.

Postopératoire

- **Examen visuel postopératoire**

Visualisez le résultat de l'intervention une fois celle-ci terminée et comparez le à la planification préopératoire.

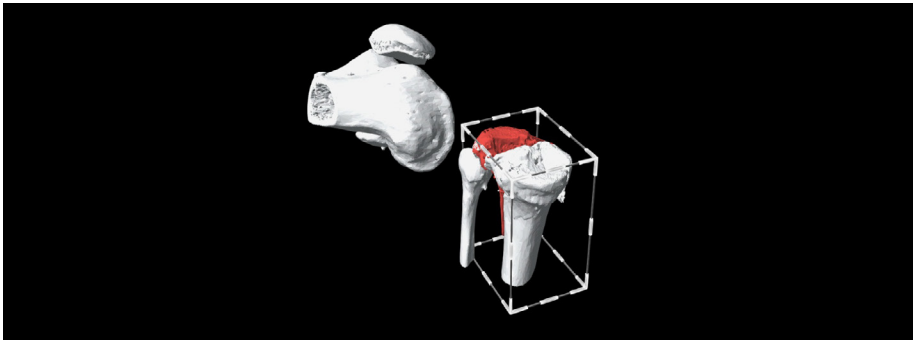

- **Visualisation et révision de la planification**


La visualisation 3D de la planification permet d'observer en détail les résultats souhaités.

- **Retransmission en direct de l'opération**

La diffusion en direct de la vue des lunettes HoloLens permet à d'autres personnes de participer à l'opération.

- **Documentation et formation**

Enregistrez le champ de vision des lunettes HoloLens ainsi que les hologrammes affichés, afin de documenter l'intervention chirurgicale ou à des fins éducatives.

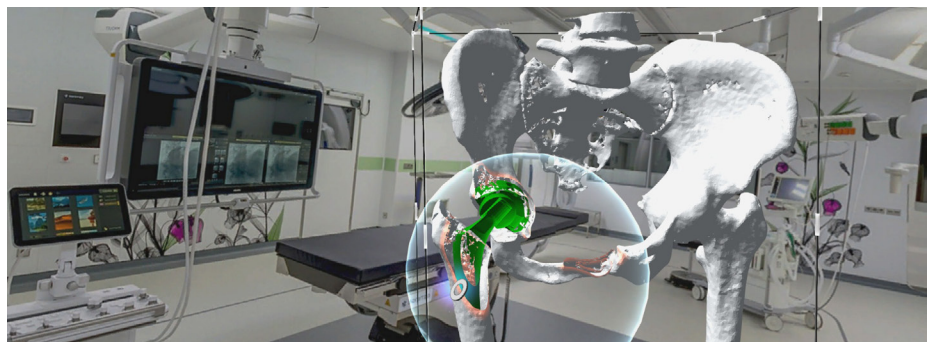

- **Responsabilisation des patients**

Utilisez **mediCAD® MR** pour impliquer vos patients dans la chirurgie.

- **Intervention de personnes extérieures**

Recevez de l'aide de personnes extérieures à la salle d'opération en les faisant intervenir

- **Responsabilisation du patient**

Même après l'intervention, vous pouvez également utiliser **mediCAD® MR** pour impliquer le patient et faire en sorte qu'il reparte avec un sentiment de satisfaction.



Utilisation intuitive de mediCAD MR

Chez **mediCAD®**, nous comprenons que l'environnement hospitalier mouvementé ne laisse que peu de temps pour se familiariser avec les nouvelles technologies. Cependant, il est essentiel de bien comprendre ses outils pour traiter au mieux ses patients. C'est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif de vous fournir **mediCAD® MR**, un logiciel d'une grande innovation mais facile et intuitif dans son utilisation.

Tutoriel interactif

Comme tous les produits **mediCAD®**, le logiciel MR s'accompagne d'une formation complète pour l'utilisateur. Et si vous avez des questions au cours de son utilisation, le logiciel propose également un tutoriel interactif qui vous guidera avec son avatar à travers les différentes fonctionnalités. Il peut être lancé avant la première utilisation ou pendant le flux de travail.



Vous voulez en savoir plus?

Scannez le QR-Code suivant pour voir **mediCAD MR** en action:



Vous pouvez également nous contacter directement pour une présentation du produit ou pour toute autre question :

Tél : +33 6 63 79 45 74

E-Mail : france@mediCAD.eu



Informations du fabricant

Toutes les désignations de produits et les noms de sociétés sont des marques protégées ou sont soumis à droits d'auteur. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées à tout moment.

mediCAD Hectec GmbH
Opalstraße 54
DE- 84028 Altdorf

Recommandations concernant le matériel

mediCAD® MR nécessite des lunettes Microsoft HoloLens 2® avec au moins 500 Mo de stockage libre. De plus, vous devez disposer d'un PC équipé de Windows 10 ou 11 64 bits avec un processeur récent d'au moins 2,0 GHz, d'un minimum de 8 Go de RAM et du Framework , .NET Framework 4.X. La résolution d'affichage recommandée est en Full HD et un écran de diagnostic n'est pas nécessaire.

Formation




mediCAD® MR ne nécessite aucune connaissance préalable et est facile à appréhender. L'utilisateur est guidé à travers le programme, toutes les instructions étant affichées de façon claire. La durée de la formation est généralement d'environ 3 à 4 heures.








mediCAD® Hectec vous propose une formation adaptée pour chaque module 3D. Les formations sont réalisées sur site et en ligne.

Compatibilité

mediCAD® MR communique avec toutes les interfaces **DICOM®** et est donc compatible avec tous les PACS. De nombreux formats d'image peuvent également être importés si nécessaire. Le logiciel est compatible avec tous les modules de planification **mediCAD® 3D**, pce qui facilite le transfert de la planification et la connexion à toutes les bases de données d'implants **mediCAD® 3D**.

Demandez un présentation de la solution MR. Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

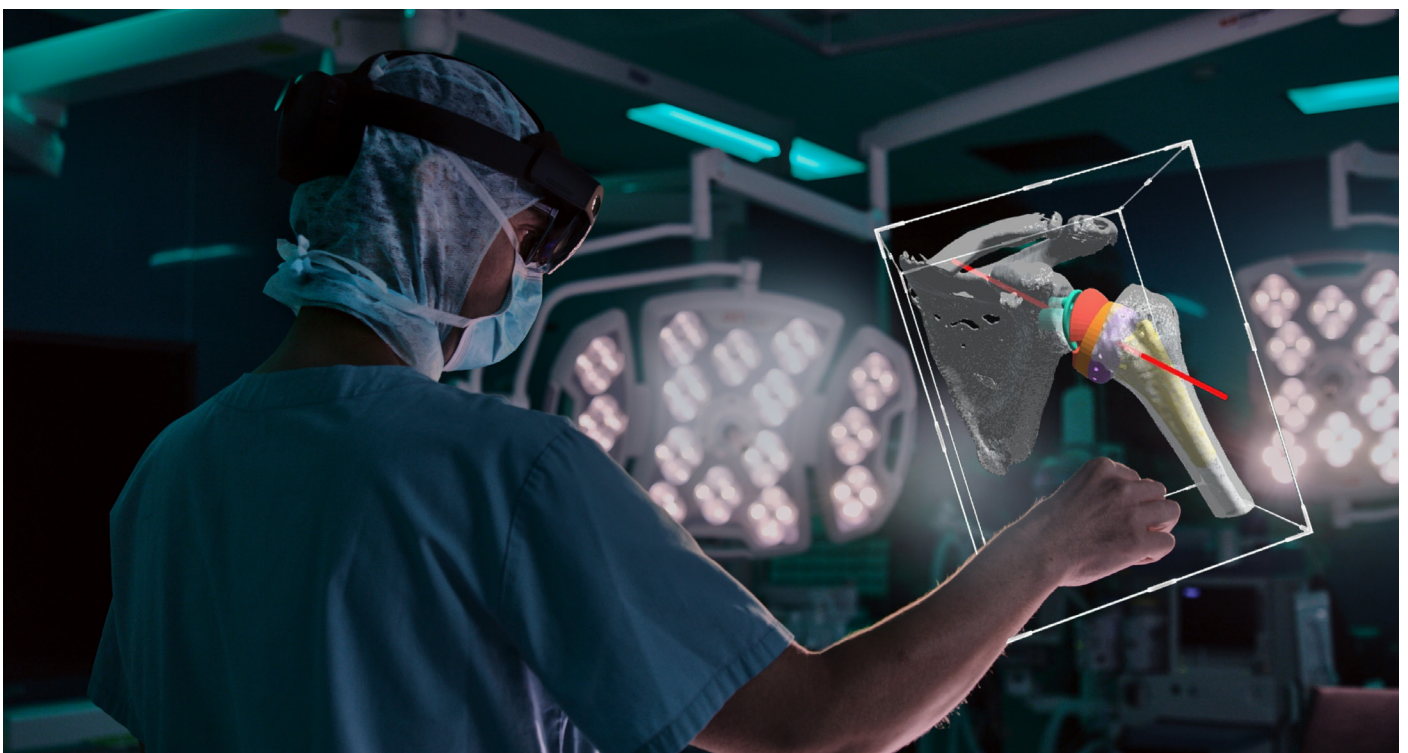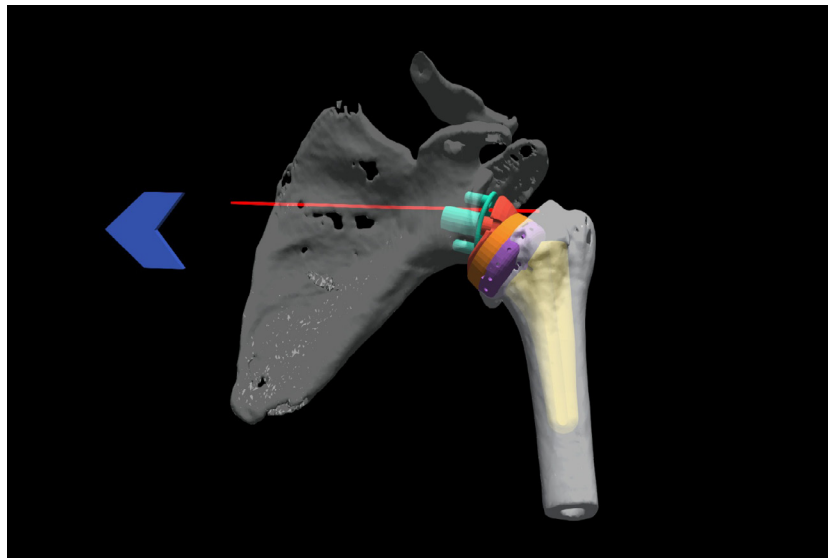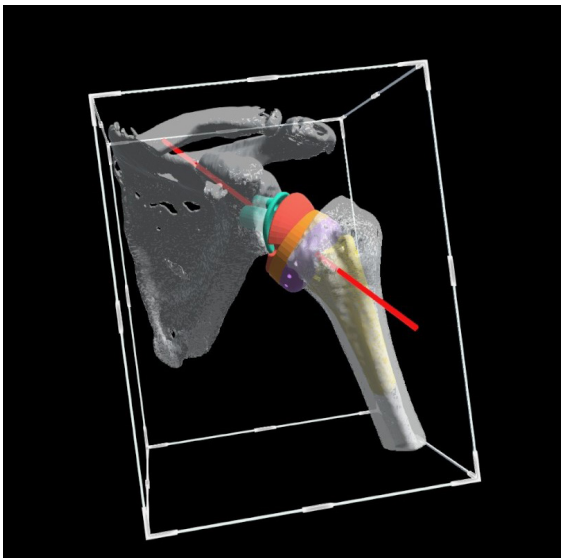

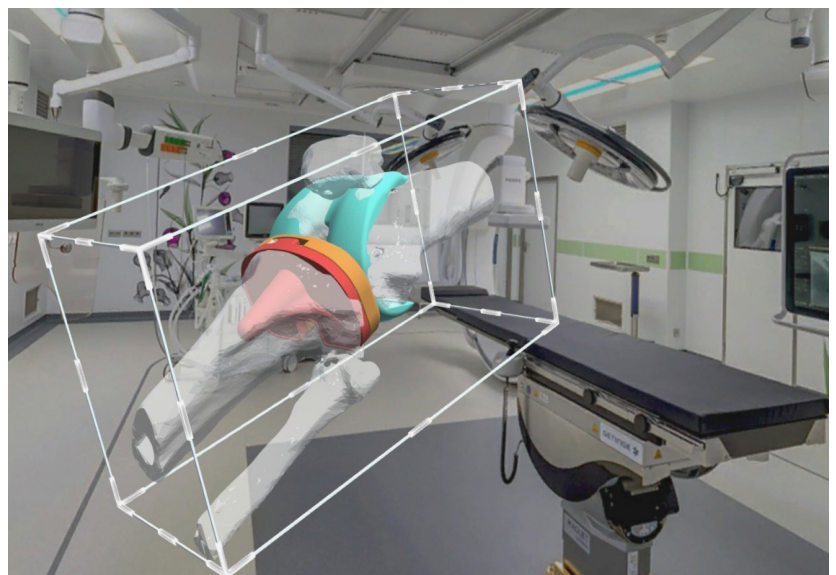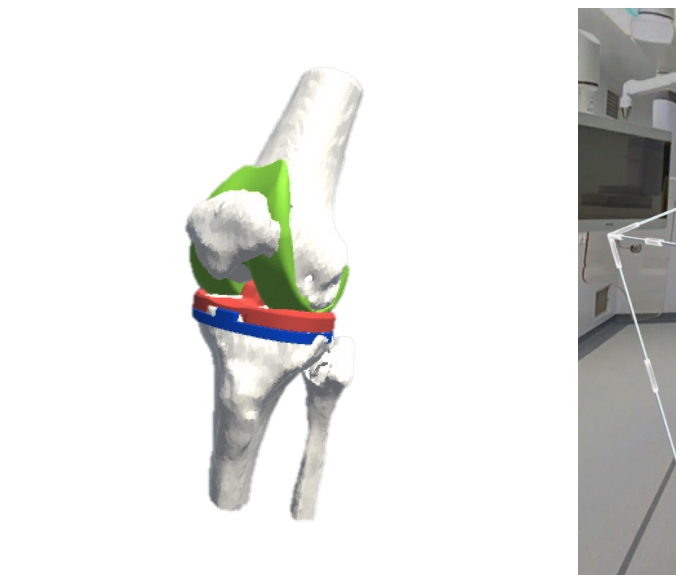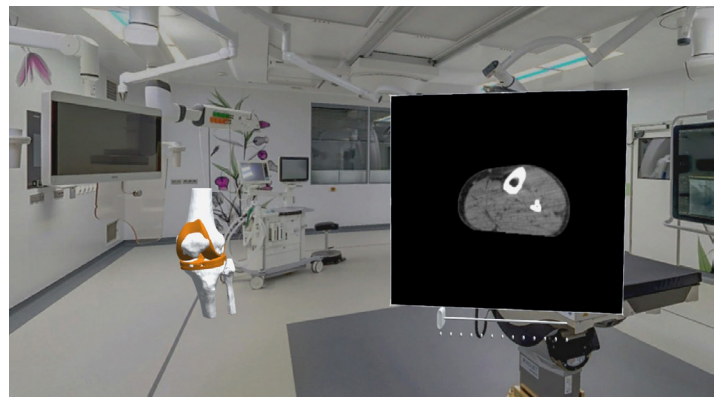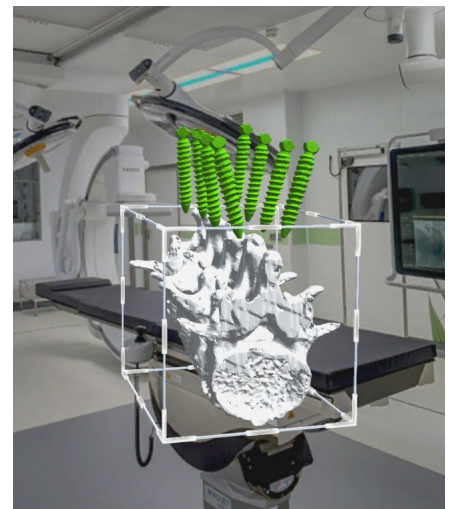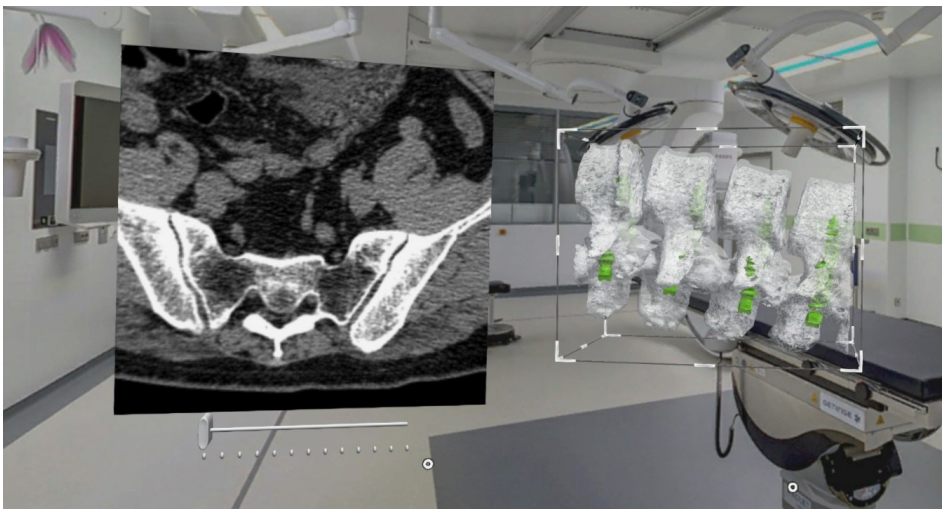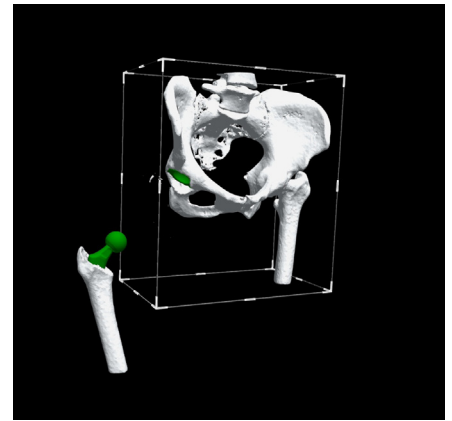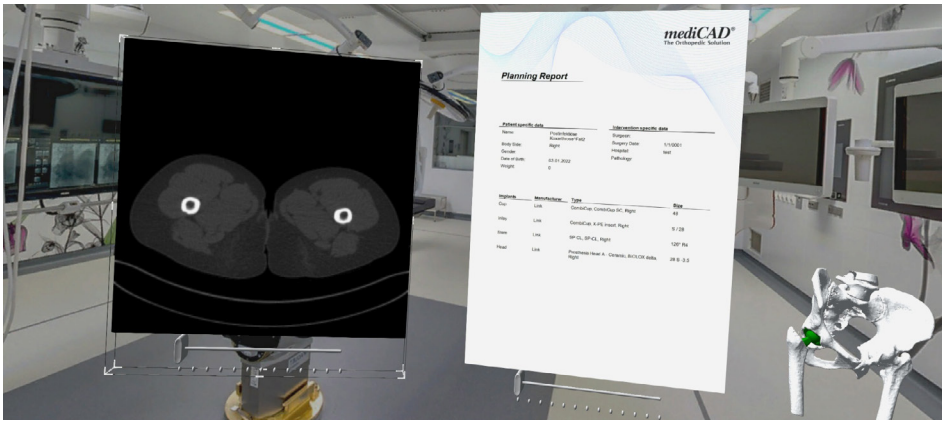

Premium Solution for Orthopedics

CE
Print-No. 1255/09-2023

- **mediCAD Hectec GmbH**

Opalstr. 54,
D-84032 Altdorf/Landshut, Allemagne

- **Branch Office Bad Homburg**

Werner-Reimers-Straße 2-4,
D-61352 Bad Homburg, Germany

- **Branch Office Hamburg**

Schellerdamm 16,
D-21079 Hamburg, Germany



+49 871 330203 0



sales@medicad.eu

- **Subsidiary USA**

mediCAD US, Inc.
191 Peachtree St. NE, Suite 3720 Atlanta,
GA 30303, USA



+1 470 3441215



sales@medicad.eu

- **France sales office**



+33 6 63 79 45 74



france@medicad.eu

CONTACTEZ-NOUS



mediCAD[®]